



MEDISCA – BOUCHON ADAPTATEUR (K, 28mm)

28-410, PEBD, Rouge (col moyen)

DESCRIPTION : ASSOCIEZ LE CODE DE BOUCHON DU FLACON À LA VERSION MEDISCA - BOUCHON ADAPTATEUR DE VOTRE CHOIX POUR UN RACCORDEMENT FACILE AUX BOUCHONS DE FLACONS, CE QUI SIMPLIFIE LE REMPLISSAGE DES SERINGUES ORALES. VEUILLEZ CONTACTER UN REPRÉSENTANT COMMERCIAL MEDISCA POUR OBTENIR VOTRE PROPRE « ADAPTOR-CHEK » MEDISCA, QUI VOUS PERMETTRA D'IDENTIFIER RAPIDEMENT LE FILETAGE DES FLACONS.

CARACTÉRISTIQUES :

-  Fabriqué en polyéthylène basse densité (PEBD) et muni d'un bouchon attaché et refermable
-  Sans DEHP
-  Utilisé sur la plupart des bouteilles en verre ou en plastique pour aspirer des liquides
-  Sans latex


INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES :

Code de clôture :

Lettre	Code de clôture	Code mm	Finition du col GPI/SPI
A	18-400	18	400
B	20-400	20	400
C	22-415	22	415
D	24-410	24	410
M	24-415	24	415
E	28-400	28	400
K	28-410	28	410
F	28-415	28	415

Explication du code de clôture :

- 1) Le code de fermeture est composé du diamètre du bouchon (mm) et du type de col.
- 2) Les finitions de goulot les plus courantes (et celles que nous allons utiliser) sont les 400, 410 et 415. Si vous comparez l'un des goulots de bouteille ci-dessous avec la photo, vous pourrez identifier la finition.

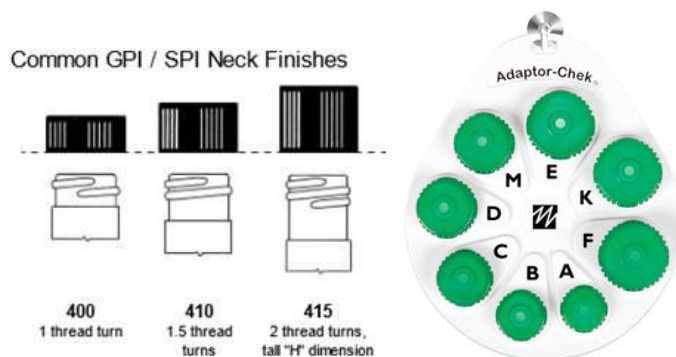

- 3) Les codes de fermeture doivent correspondre ; par exemple, une bouteille 24-410 ne s'adapte qu'à un bouchon 24-410 (bouchon adaptateur D).
- 4) Vous constaterez que certains bouchons adaptateurs ont le même diamètre et peuvent donc facilement prêter à confusion, même en utilisant l'Adaptor-Chek (voir ci-dessus). Des problèmes peuvent survenir si l'on utilise un bouchon adaptateur de type D à la place d'un bouchon adaptateur de type M, par exemple.